BIOTECK®

CHondroGrid

PARA EL BIENESTAR DEL MOVIMIENTO

Colágeno hidrolizado de bajo peso molecular



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

LA PREPARACIÓN DE CHONDROGRID® PARA GARANTIZAR LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO

QUÉ SIRVE:

- Un envase de Chondrogrid®


DOBLE ENVASE ESTÉRIL

Por su doble envase estéril el producto también puede utilizarse en quirófano




ADEMÁS SIRVEN:

- Una jeringa
- Dos agujas estériles
- Un vial de agua estéril de 2 ml

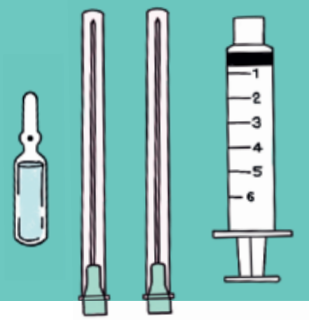


1

- Aspirar 2 ml de agua estéril apirógena con una jeringa de 5 ml incontaminada a la cual se ha puesto una aguja nueva.
- Al concluir la operación, proteger la aguja con su capuchón.

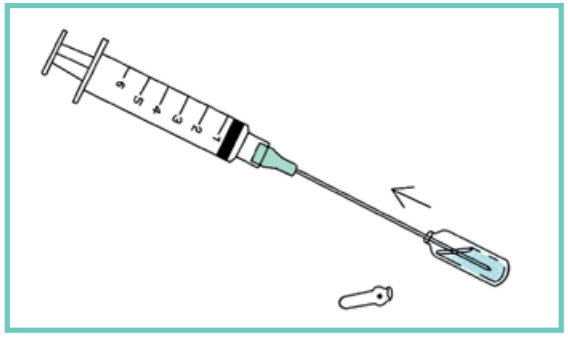


2

- Retirar el frasco de ChondroGrid® de su blíster, sin tocar el séptum de goma.
- Coger la jeringa antes cargada con 2 ml de agua e inyectar todo el contenido en el frasco de ChondroGrid®.
- Agitar el frasco hasta lograr la suspensión completa de ChondroGrid®.

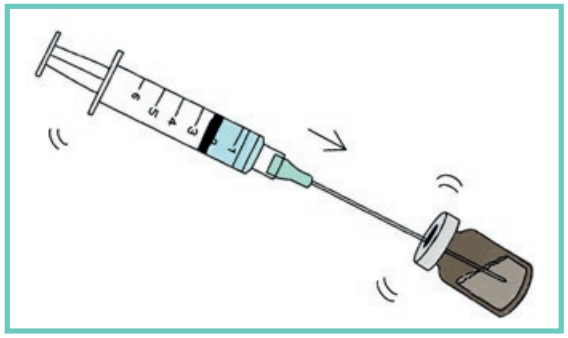

3


- Manteniendo el frasco inclinado, aspirar completamente el contenido con la jeringa
- Al concluir la operación, proteger la aguja con su capuchón.

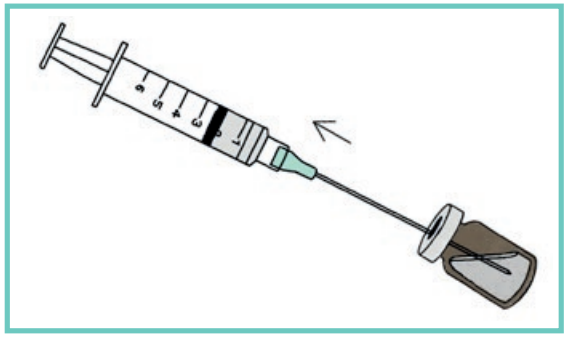

4


- Reemplazar la primera aguja utilizada para la preparación por la segunda aguja que se utilizará para la inyección.

PRESERVACIÓN DE LA ESTERILIDAD DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

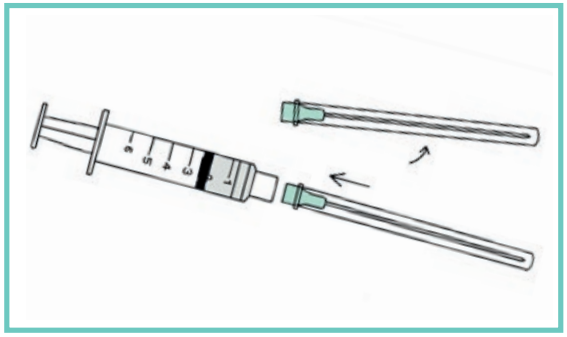

5

- Tras preparar adecuadamente el campo, proceder a inyectar ChondroGrid®

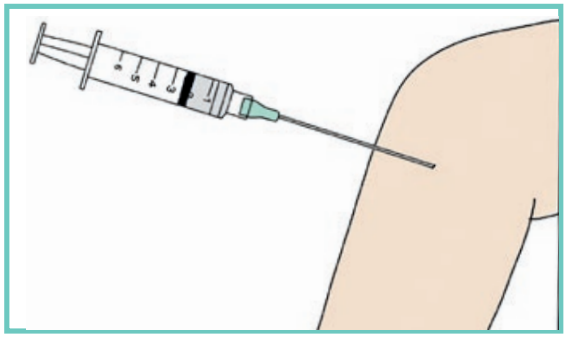

VER EL VIDEO COMPLETO SOBRE LA PREPARACIÓN DE CHONDROGRID®



BIOTECK®.
INNOVACIÓN EN BIOMATERIALES.

Bioteck® es una empresa italiana que, desde 1995, produce sustitutos óseos, membranas protectoras y soluciones para regeneración empleadas con éxito en ortopedia, neurocirugía y en cirugía buco-maxilofacial.
La investigación científica y la innovación son los valores que han permitido a **Bioteck®** patentar nuevos procesos de producción y crear biomateriales únicos por su alta calidad, rendimiento y garantía de seguridad. Actualmente los materiales se utilizan en 72 países de todo el mundo.
En su centro polifuncional de investigación y desarrollo y gracias a los procesos de producción más avanzados, cada día **Bioteck®** persigue su principal objetivo: innovar en biomateriales.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY.
COMUNIDAD CIENTÍFICA PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE LA ELECCIÓN CONSCIENTE.

Bioteck Academy es una comunidad científica innovadora que promueve la circulación y difusión del conocimiento en el campo de la medicina regenerativa aplicada a la odontología, la cirugía maxilofacial, la ortopedia y la neurocirugía.
Nace como un lugar de agregación de conocimientos clínicos y científicos en los que **Bioteck®** se ha centrado en sus veinte años de investigación, y que hoy es una realidad abierta a todos los profesionales que decidan unirse compartiendo su experiencia quirúrgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

IMQ CERTIFIED

BIOTECK®

BIOTECK® Academy

Bioteck S.p.A.
Domicilio administrativo y social
Via E. Fermi, 49 – 36057
Arcugnano (VI)– Italia
Tel.: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro Polifuncional de Producción
Investigación y Desarrollo
Via G. Agnelli, 3 – 10020
10020 Riva presso Chieri (TO) – Italia

© laziendinacreativa.it