BIOTECK®

CHondroGrid

POUR LE BIEN-ÊTRE DU MOUVEMENT

Collagène hydrolysé de faible poids moléculaire



PRÉPARATION DU PRODUIT

PRÉPARATION DE CHONDROGRID® POUR GARANTIR LA STÉRILITÉ DU PRODUIT

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :


- Une boîte de ChondroGrid®

Le double emballage stérile permet d'utiliser le produit même en salle d'opération




IL FAUT ÉGALEMENT :

- Une seringue
- Deux aiguilles stériles
- Un flacon d'eau stérile de 2 ml

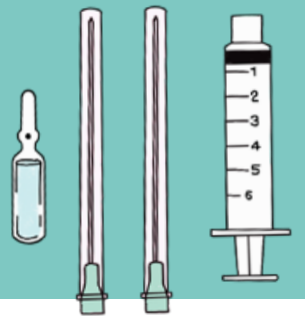


1

- Prélever 2 ml d'eau stérile apyrogène à l'aide d'une seringue de 5 ml non contaminée, sur laquelle a été fixée une aiguille neuve.
- À la fin de l'opération, protéger l'aiguille avec son capuchon.

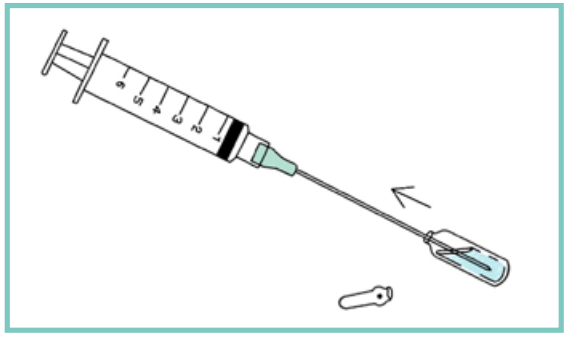


2

- Retirer le flacon de ChondroGrid® de son blister, en évitant de toucher le bouchon en caoutchouc.
- Prendre la seringue préalablement chargée avec les 2 ml d'eau et injecter tout le contenu dans le flacon de ChondroGrid®.
- Agiter délicatement le flacon pour favoriser la mise en suspension complète de ChondroGrid®.

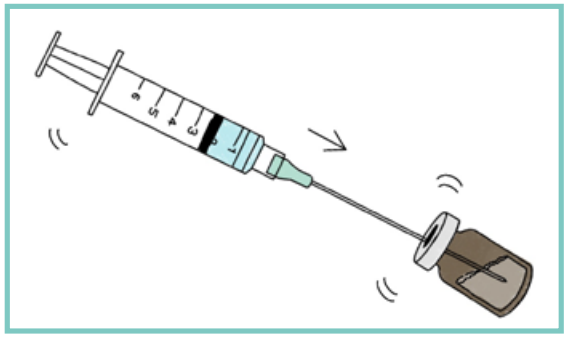

3


- En maintenant le flacon incliné, prélever entièrement le contenu avec la seringue
- À la fin de l'opération, protéger l'aiguille avec son capuchon

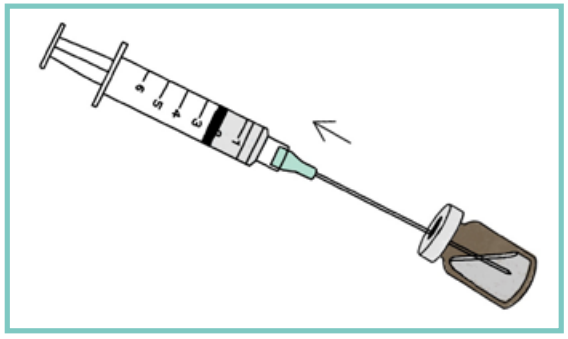

4


- Remplacer la première aiguille utilisée pour la préparation par la deuxième aiguille destinée à l'injection.

PRÉSERVATION DE LA CHAÎNE DE STÉRILITÉ PENDANT LA MANIPULATION DU PRODUIT

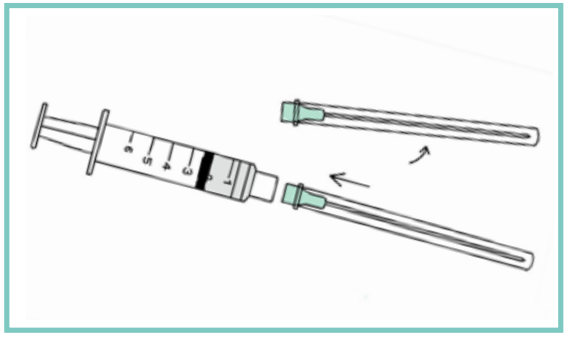

5

- Après avoir correctement préparé le champ opératoire, procéder à l'injection de ChondroGrid®

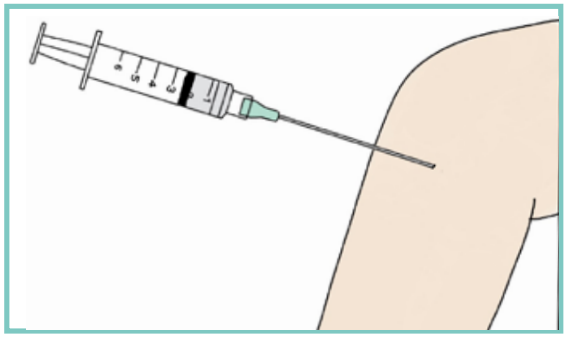

REGARDEZ LA VIDÉO COMPLÈTE SUR LA PRÉPARATION DE CHONDROGRID®



BIOTECK®.
INNOVATING BIOMATERIALS.

Bioteck® est une entreprise italienne qui produit depuis 1995 des substituts osseux, des membranes de protection et des solutions régénératrices utilisées avec succès en orthopédie, en neurochirurgie et en chirurgie orale et maxillo-faciale.
La recherche scientifique et l'innovation sont les valeurs directrices qui ont permis à **Bioteck®** de breveter de nouveaux processus de production et de créer des biomatériaux uniques pour leur profil de qualité élevé, leur niveau de performance et leurs garanties de sécurité. Les matériaux sont désormais utilisés dans 72 pays du monde entier.
Dans son centre de R&D multifonctionnel et grâce à des processus de production de pointe, **Bioteck®** poursuit chaque jour son objectif principal : innover dans les biomatériaux.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY.
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE POUR LA CULTURE DU CHOIX RESPONSABLE.

La **Bioteck Academy** est une communauté scientifique innovante qui favorise la circulation et la diffusion des connaissances dans le domaine de la médecine régénératrice appliquée à l'odontologie, la chirurgie maxillo-faciale, l'orthopédie et la neurochirurgie.
Née comme un lieu d'agrégation des connaissances cliniques et scientifiques concentrées par **Bioteck®** en vingt ans de recherche, elle est aujourd'hui une réalité ouverte à tous les professionnels qui décident de se joindre au partage de leur expérience chirurgicale.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

IMQ CERTIFIED

BIOTECK

BIOTECK Academy

Bioteck S.p.A.
Siège administratif et juridique
Via E. Fermi, 49 – 36057
Arcugnano (VI) – Italie
Tél : +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centre multifonctionnel de Production, de Recherche et de Développement
Via G. Agnelli, 3 – 10020
Riva presso Chieri (TO) – Italie

© laziendinacreativa.it