BIOTECK®

CHondroGrid

PER IL BENESSERE DEL MOVIMENTO

Collagene idrolizzato a basso peso molecolare



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

LA PREPARAZIONE DI CHONDROGRID® PER GARANTIRE LA STERILITÀ DEL PRODOTTO

COSA SERVE:

- Una confezione di Chondrogrid®


DOPPIA CONFEZIONE STERILE

Il doppio confezionamento sterile consente l'uso del prodotto anche in sala operatoria




INOLTRE SERVONO:

- Una siringa
- Due aghi sterili
- Una fiala di acqua sterile da 2ml

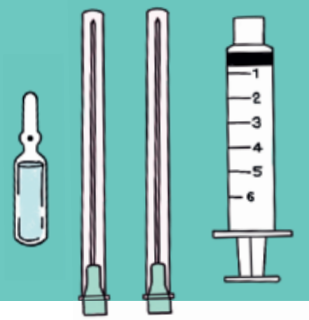


1

- Aspirare 2 ml di acqua apirogena sterile con una siringa da 5 ml incontaminata a cui è stato connesso un ago nuovo.
- Alla fine dell'operazione proteggere l'ago con il suo cappuccio.

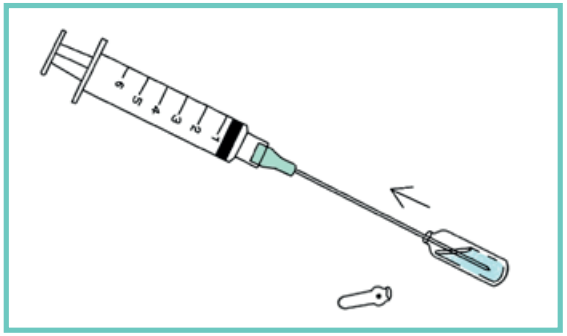


2

- Prelevare il flacone di ChondroGrid® dal suo blister, evitando di toccare il tappo di gomma.
- Prendere la siringa precedentemente caricata con i 2 ml di acqua e iniettare tutto il contenuto all'interno del flacone di ChondroGrid®.
- Scuotere delicatamente il flacone per favorire la completa sospensione di ChondroGrid®.

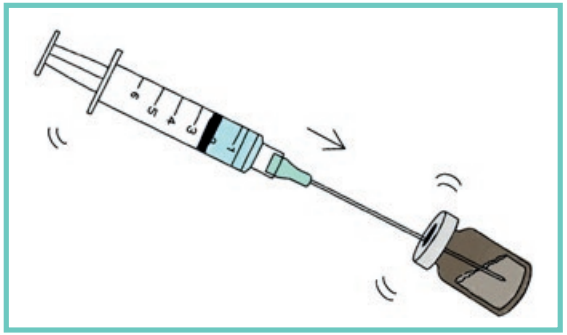

3


- Mantenendo inclinato il flacone, aspirare completamente il contenuto con la siringa
- Al termine dell'operazione proteggere l'ago con il cappuccio

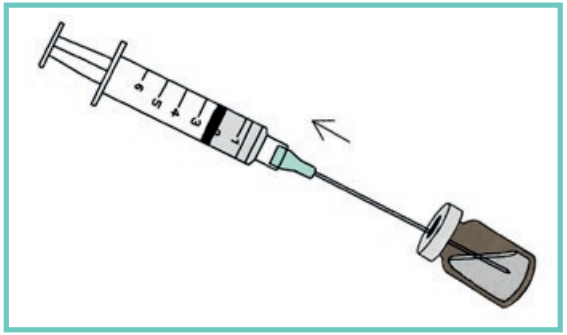

4


- Sostituire il primo ago usato per la preparazione con il secondo ago da utilizzarsi per l'iniezione.

PRESERVAZIONE DELLA CATENA DI STERILITÀ DURANTE LA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO

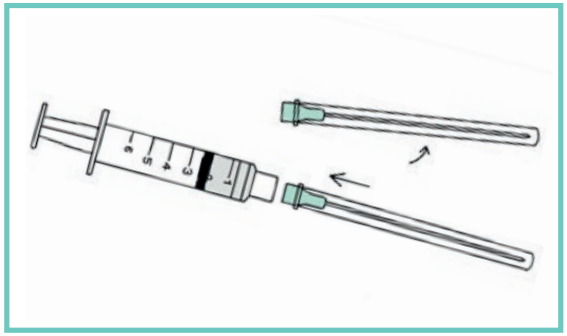

5

- Dopo l'opportuna preparazione del campo procedere all'iniezione di ChondroGrid®

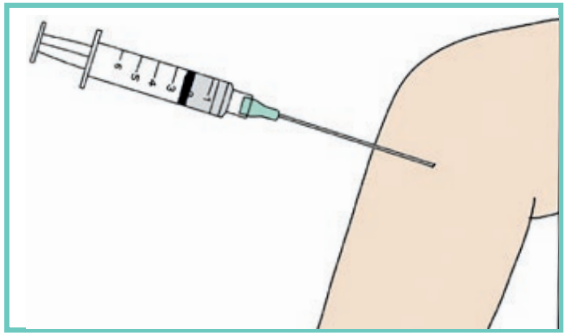

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SULLA PREPARAZIONE DI CHONDROGRID®



BIOTECK®.
INNOVATING BIOMATERIALS.

Bioteck® è un'azienda italiana che dal 1995 produce sostituti ossei, membrane protettive e soluzioni rigenerative impiegate con successo in ortopedia, neurochirurgia e chirurgia oro-maxillo facciale.
La ricerca scientifica e l'innovazione sono i valori guida che hanno permesso a **Bioteck®** di brevettare nuovi processi produttivi e di creare dei biomateriali unici per l'alto profilo di qualità, per il livello di prestazione e per le garanzie di sicurezza. Materiali oggi utilizzati in 72 paesi nel mondo.
Nel proprio centro polifunzionale di ricerca e sviluppo e grazie a processi produttivi all'avanguardia, ogni giorno **Bioteck®** persegue il proprio obiettivo principale: innovare i biomateriali.

WWW.BIOTECK.COM

BIOTECK ACADEMY.
COMMUNITY SCIENTIFICA PER
LA CULTURA DELLA SCELTA CONSAPEVOLE.

Bioteck Academy è l'innovativa community scientifica che promuove la circolazione e la diffusione del sapere nel campo della medicina rigenerativa applicata all'odontoiatria, alla chirurgia maxillofacciale, all'ortopedia e alla neurochirurgia.
Nata come luogo di aggregazione delle conoscenze cliniche e scientifiche focalizzate da **Bioteck®** in vent'anni di ricerca, oggi è una realtà aperta a tutti i professionisti che decidano di aderire condividendo la propria esperienza chirurgica.

WWW.BIOTECKACADEMY.COM

IMQ CERTIFIED

BIOTECK®

BIOTECK® Academy

Bioteck S.p.A.
Sede Amministrativa e Legale
Via E. Fermi, 49 – 36057
Arcugnano (VI) – Italia
Tel: +39 0444 289366
Fax: +39 0444 285272

Centro Polifunzionale Produzione, Ricerca e Sviluppo
Via G. Agnelli, 3 – 10020
Riva presso Chieri (TO) – Italia

© laziendinacreativa.it